

## فرآیند پیس میکر پوستی

روشن کردن دستگاه

چک سینه بیمار از نظر نیاز به شیو

چسباندن skin tact ها بر روی قفسه سینه بیمار به روش صحیح

متصل کردن سیم مربوط به پیس میکر به محل مربوط به پدال های دفیبریلاتور

تشخیص آریتمی های نیازمند به پیس میکر


تنظیم دکمه سینکرونیز (demand) و آسینکرونیز (Fix) بر روی دستگاه طبق دستور پزشک

تنظیم میزان ریت بر روی دستگاه طبق دستور پزشک

تنظیم مقدار برون ده بر روی دستگاه تا زمانی که تسخیر رخ دهد ( ظهور QRS پس از هر spike)

مشخص کردن مقدار برون ده حداقل و مطمئن

چک نبض بیمار از نظر وجود پاسخ بطنی (مکانیکال)

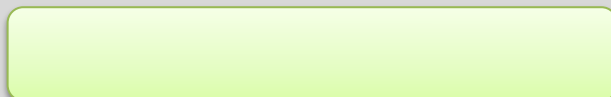

ثبت اقدامات انجام شده به نحو صحیح